



100% POLYPROPYLENE PE LAMINATION (MICROPOROUS)

Two Layer Laminate - Water Repellent - Anti Static - Breathable

KEMENKES RI AKD 21603020939

SUITABLE APPLICATIONS

- ☒ Dokter dan Perawat di ICU
- ☒ Petugas Laborat Penanganan PASIEN INFEKSIOUS
- ☒ Dokter dan Perawat yang merawat PASIEN INFEKSIOUS



FEATURES



PERFORMANCE LEVELS

TEST STANDARD	TEST ITEM(s)	TEST RESULT	TEST STANDARD	CLASS	TEST RESULT/COMPLIANCE
GB 19082-2009	Resistant to Water Penetration	Pass	EN 14750	Type 4B	Protective performance against spray and infective agents
GB 19082-2009	Water-Vapour Transmission	Pass	EN ISO 13982-1	Type 5B	Protection against airborne solid particulates and infective agents
GB 19082-2009	Resistance to Surface Wetting	Pass	EN 13014	Type 6B	Limited protective performance against light spray, liquid or low pressure, low volume splashes and infective agents
GB 19082-2009	Tensile Strength	Pass	EN 1872-2	Class 1	Total Inward Leakage
GB 19082-2009	Elongation at Break	Pass	EN 14126	Class 6	Resistance to penetration by contaminated liquids under hydrostatic pressure
GB/T 14233.1-2008	Epoxyethane	Pass		Class 1	Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids
GB 19082-2009	Anti Synthetic Blood Penetrate Performance	Pass		Class 1	Resistance to penetration by contaminated liquids aerosols
GB 19082-2009	Filtering Efficiency (shell)	Pass		Class 2	Resistance to penetration by contaminated solid particles
GB 19082-2009	Electrostatic Decay Performance	Pass			

WHITE

SINGLE USE

SIZE	S	M	L	XL
Chest (1/2)	54	58	62	66
Sleeve	89.5	92	94.5	97
Length	147	151	155	159



Product Specification #1

Deskripsi : *Coverall Medis White Non Woven Fabric*
Nomor Izin Edar : **KEMENKES RI AKD 21603020939**
Garmen : **PT. STARCAM BUSANA APPAREL**
Sertifikasi Garmen : 1. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan KEMENKES RI No : FK.01.02/VI/644-e/2020;
2. Intertek Certified Supplier Qualification Program No. F_IAR_71315_SQP;
3. AMFORI BSCI Platform Member.

Material Product :

Material			
100% Polypropylene dengan TPU atau PE laminasi (Microporous)	2,734 m	Bahan baku utama dengan coating yang sudah Lulus Uji untuk kebutuhan Medis	Shanghai in-need Textile Co., LTD / Kufner Textile Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd / Kae Hwa Industrial Co. Ltd
Elastic Tape	2,2419 m	Bahan pendukung untuk hood, waist, cuff, dan bottom	Indonesia
Nylon Zipper	1 pcs	Bahan pendukung untuk menutupi center front produk	Indonesia
Benang Nylon 100D/2 dan 60/3	300m	Bahan pendukung untuk menjahit produk	Indonesia

Distributor Tunggal : **PT. MITRA SARANA INDO**
Sertifikasi Distributor : 1. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan KEMENKES RI No.: FK.01.01/VI/2062-e/2020;
2. ISO 9001 : 2015 Certified for *Procurement and Production of Pharmaceutical Devices, Personal Protective Equipmnet for Medical and Medical Devices*
Importer, Laboratory Devices Importer No.: 2006100010299K001





Product Specification #2



DECRPTION	SIZE (Cm)			
	S	M	L	XL
BODY LENGTH	161.5	166.5	171.5	176.5
CHEST WIDTH	58.5	61.0	63.0	65.0
SLEEVE LENGTH	74.0	74.5	75.0	75.5
SIZE RATIO (FIXED)	1	2	2	1

Product Specification #3



HAZMAT SUIT		STARCAM FINAL INSPECTION REPORT							
GSM		Carton		Inspection date :		22nd APRIL, 2020		1st	
TOP SMPL CMNT		GARMENT TEST		NON WOVEN		Y		KNIT	
Buyer :		Division :		NON WOVEN		Country :		INDONESIA	
Style No :		HAZMAT SUIT		Color :		WHITE		PO#	
Order Qnty :		2000 PCS		Ship Mode :		TRUCKING		Delivery :	
Order Type :		MYSAFE-Coverall Hazmat Suit		Vendor Name :		Factory Name : STARCAM APPAREL			
		Yes		No				Yes	
								No	
Damage on the carton box		v		Barcode Sticker on Polybag				v	
Shipping marks on carton box		v		Hangtag (sticker)				v	
Qty on cartons checked		v		Main / Care / Size Label				v	
Barcode Sticker on Carton box		v		Plaket Hang Tag				v	
Attention mark on polybag		v		Spare Button				v	
ACL 2.5 - SINGLE SAMPLING / NORMAL / GENERAL INSPECTION LEVEL II									
Lot Size		1 to 30		31 - 60		61 - 150		151 - 280	
Sample Q'ty		8		13		20		32	
Accept & Reject		0/1		0/1		1/2		2/3	
INSPECTION DETAILS									
Color		WHITE							
Size		S/M/L/XL							
Carton No.		51832							
Defect Category		INSPECTIONS						Comment	
		1st		2nd		3rd			
		major		minor		major		minor	
01 Material defect/Damage									
02 Shading defect									
03 Cleanliness									
04 Component/Assembly									
05 Seam stitching									
06 Finishing/pressing									
07 Label, HT, Shipping									
08 Pocket, Placket									
09 Collar, Cuff									


mysafe

FACE SHIELD



SPESIFIKASI TEKNIS


Bisa buka tutup

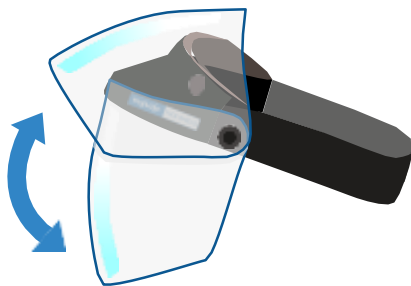

Terbuat dari Arcylonitrile Butadiene
Styrene (ABS) tebal 2 mm



Anti Foging

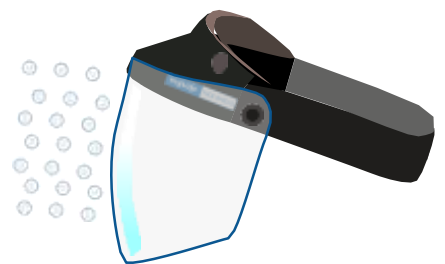

Bisa dicuci



Memiliki berat 22 gram
tahan banting

Mudah digunakan
nyaman dan praktis



mysafe **GOGGLES**



369 MEDICAL GOGGLE SPECIFICATION

Part Number	Model	Material	Size	Weight	Thickness	Colour
YY-32	visor	PC (Polycarbonate) with Dual Laminated Film	60 x 62 x 58 mm	64 g	15 mm	Optical Clear
	Goggles Frame	PVC (PolyVinyl Chloride)			15 mm	Clear
	Headband	Rubber and Polyurethan Flexible Foam			15 mm	White/Black

SAFETY GOGGLES



Pakai dengan cara masukan dari atas kepala



Tarik kebawah perlahan bagian depan goggles hingga menempel ke hidung



Rekatkan goggles dengan bentuk wajah dan hidung




Pastikan tali goggles sudah terpasang dengan baik mengelilingi kepala

ANTI-FOG LENS

ANTI-SPLASH

SHOCKPROOF

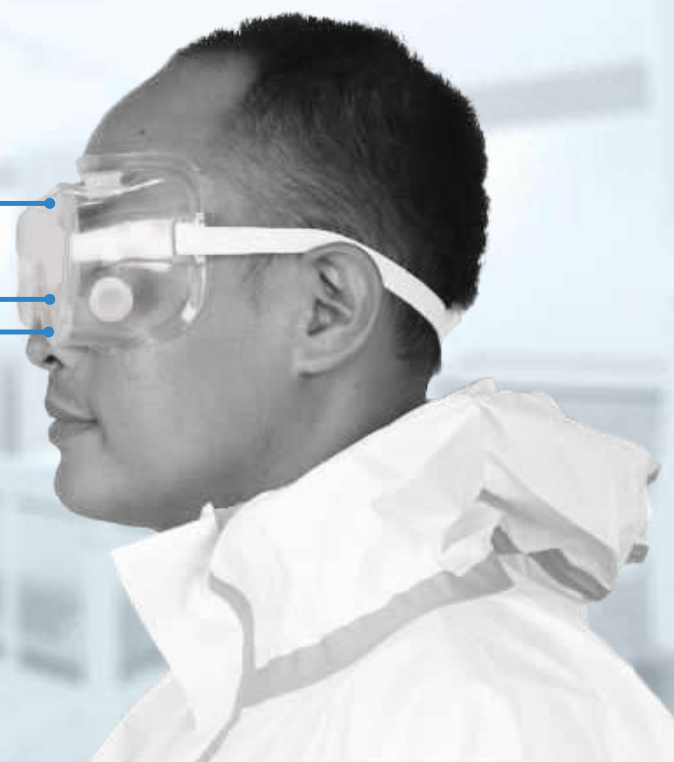



3 LAYER DISPOSABLE MASK

Components	Material	Specification
Ear rope	Non-Woven cloth	3 mm, White color
Nose bar	PVC+Iron	Single core, 3 mm width
Outer layer	Non-Woven cloth	Leak proof Non-Woven cloth, 175 mm width, 25g/m2
Middle layer	Melt-Blown cloth	PFE>95, 175 mm width, 25g/m2, White color
Inner layer	Non-Woven cloth	Skin touch Non-Woven cloth, 195 mm width, 25g/m2

3 LAPISAN FILTER PELINDUNG



Genggam masker di tangan dan posisikan menutup hidung, mulut dan dagu



Tekan kawat untuk disesuaikan pada bentuk hidung dan wilayah



Pasangkan tali di pengait masker pada telinga



Pastikan masker sudah pas, letakan tangan di sekeliling masker dan hembuskan nafas, sesuaikan posisi masker lagi jika terasa ada kebocoran

OUTER LAYER


Hydrophobic non-woven layer

MIDDLE LAYER

Melt blown filter

INNER LAYER

Non-woven layer

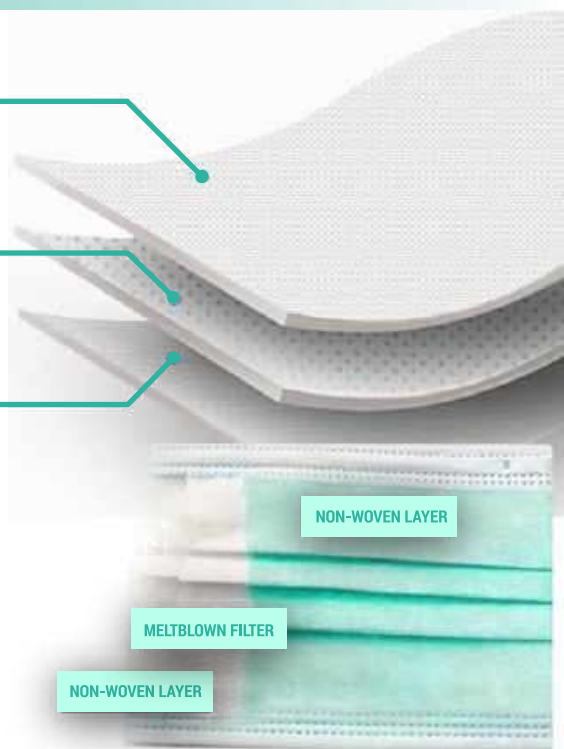



SPEKIFIKASI

- KN95 Level
- Perlindungan 5 lapis
- Perlindungan yang lebih efisien
- Lebih nyaman
- Anti bakteri
- Membantu pencegahan kontaminasi bakteri/virus
- Mencegah percikan/ butiran air liur



Genggam masker di tangan dan posisikan menutup hidung, mulut dan dagu



Pasang tali di pengait masker pada telinga




Tekan kawat untuk disesuaikan pada bentuk hidung dan wilayah



Pastikan masker sudah pas, letakan tangan di sekeliling masker dan hembuskan nafas, sesuaikan posisi masker lagi jika terasa ada kebocoran

5 LAPISAN FILTER PELINDUNG

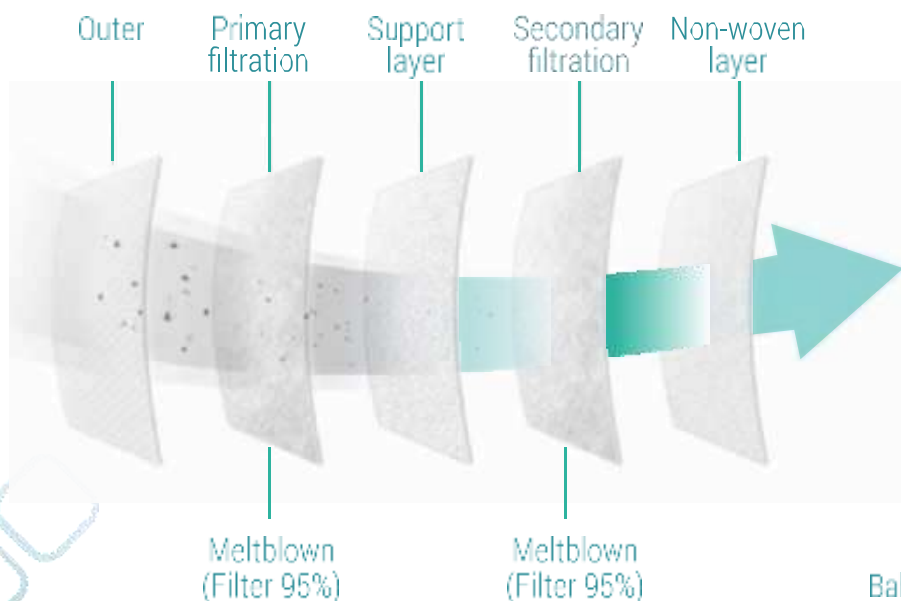

Klip hidung mudah diatur sesuai bentuk wajah



Bahan lembut

Earband elastis nyaman digunakan

mysafe

HAND SANITIZER



SPEKIFIKASI

- Alkohol 70%
- Ukuran 60 ml & 30 ml
- Ethanol 70%
- Glycerin 0,14%
- Benzalkonium Chloride 0,02%
- Chlorhexidine Gluconate 0,05%

HAND SANITIZER GEL



Buka tutup tube botol
Hand sanitizer

Tuangkan cairan ke
telapak tangan

Oleskan ke seluruh
bagian telapak tangan
dan permukaan tangan

Tangan menjadi bersih bebas dari
kuman dan bakteri berbahaya



PROTOS SURGICAL GLOVES



SPESIFIKASI TEKNIS



Keluarkan satu sarung tangan dari segel bungkusannya



periksalah jadi pastikan tidak ada lubang pin atau sobekan



Sejajarkan jari tangan dan ibu jari sarung tangan dengan tangan sebelum mengenakan



Masukkan lima jari ke dalam sarung tangan dan tarik melewati pergelangan tangan



Pastikan sudah terpasang dengan pas di sekitar jari, telapak tangan dan pas di sekitar pergelangan tangan



Dan pasang sarung tangan sebelah lainnya dengan cara yang sama

Digunakan untuk
Material
FDA Status

Aktivitas Medis
Latex karet alami
Class IIa, 510K
Alat Medis

Warna
Sterilisasi

Natural
Ethylene Oxide Gas

✓ Didukung (AKD 11603410258)

✓ Powder-Free (AKD 11603410183)

✓ Packaging

4 Box/case; 50 pasang/box

✓ Fungsi dan keunggulan

- Perlindungan dari zat yang tidak diinginkan atau berbahaya
- Mudah dipakai dan membantu mencegah tergulung
- Kelembutan memberikan kenyamanan superior dan pas dipakai
- Manset manik-manik memudahkan pemakaian
- Jari jari Ambidextrous

SAFETY BOOTS



SPESIFIKASI TEKNIS

Bahan PVC

Tinggi 25 (32cm)
26 (32,5 cm)
27 (33 cm)

Kedap air

Elastis dan kuat

Anti slip



Bisa digunakan untuk
pendukung pakaian
medis/operasi



mysafe

DESINFECTANT



SPESIFIKASI

Benzalkonium Chloride 0.5 - 0.7%

Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 0.06%

Diocetyl Dimethyl Ammonium Chloride 0.2%

DESINFECTANT



Tekan perlahan
atas tube pada botol



Semprotkan ke benda yang
akan dibersihkan lalu di lap



Kuman dan bakteri
akan bersih

